

**GETINGE FD1600
FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR**



Always with you



88888



GETINGE
GETINGE GROUP

INFEKSJONSBEKJEMPELSE – ENKELT OG PRAKTISK

Med sin attraktive, moderne design, brukervennlighet og utmerkede desinfeksjonsytelse spiller Getinge FD1600 en viktig rolle i effektiv infeksjonskontroll på sykehus og pleiehjem over hele verden.

KONTINUERLIG NYSKAPNING

En nyskapende utforming, pålitelig ytelse, brukervennlig og kostnadseffektiv drift – alle disse faktorene har bidratt til å gjøre FD1600 til en suksess, med tusener av maskiner i daglig bruk som et svært effektivt element i vaskerom på sykehus og pleiehjem over hele verden.

Getinge FD1600 er en frontmatet spyledekontaminator med utmerket ytelse ved tømning, rengjøring og termisk desinfeksjon av bekken, urinflasker og bøtter. Damp leveres gjennom faste og roterende dyser i kammeret, og gir resultater som oppfyller de strenge kravene til rengjøring og desinfeksjon i den europeiske standarden, EN ISO 15883.

Getinge forbedrer kontinuerlig sine produkter, og bruker det nyeste innen teknologi for å oppfylle kravene på det globale markedet. FD1600 har mer fleksibel utforming og flere alternativer enn noen gang før, noe som gir deg flere valgmuligheter for å øke effektiviteten og forenkle bruken.

Getinge kan også bistå deg med alle andre aspekter ved det optimale vaskerommet, slik at Getinge FD1600 kan brukes maksimalt effektivt mot kryssinfeksjon som en del av den totale strategien for infeksjonskontroll.

OPPFYLLER DINE BEHOV MED DET NYESTE INNEN TEKNOLOGI

Getinge FD1600 har en rekke standardfunksjoner og tilleggsfunksjoner som sikrer trygg og pålitelig drift. Ytelsen til FD1600 er kontrollert og dokumentert for å oppfylle alle relevante normer, standarder og forskrifter.



Fleksibel utforming

Getinge FD1600 tar fleksibilitet til et helt nytt nivå med modulkonstruksjon og flere designalternativer. Den er tilgjengelig som frittstående eller benkmodell, og kombinert med muligheten til å velge polymermateriale eller rustfritt stål i kammer og utvendig kapsling, passer Getinge FD1600 for alle.




Tørkevifte

Med den valgfrie tørkeviften blir innholdet raskt tørket og kjølt ned på en mest mulig hygienisk måte med HEPA-filtrert (H13) luft, noe som gir økt sikkerhet for personalet som tømmer maskinen når syklusen er fullført.



Et bedre valg for miljøet

Getinge FD1600 er konstruert for å bruke eksepsjonelt lite vann, strøm og kjemikalier – noe som reduserer miljøpåvirkningen og kostnadene.

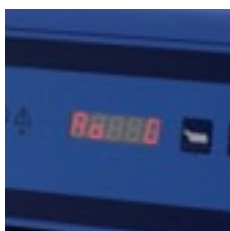

A₀-verdidisplay

Brukeren kan se desinfeksjonsnivået tydelig på A₀-verdidisplayet. Dette gir bedre sikkerhet ved at brukeren kan kontrollere at riktig desinfeksjonsnivå er nådd.






- ENKEL SERVICE
- ENKEL OPPBEVARING
- SIKKER OPPBEVARING
- EN ISO 15883-KOMPATIBEL
- HYGIENISK DESIGN
- SIKKER OG FULLSTENDIG PROSESS
- BRUKERVENNLIG


Sekvensdisplay med gjenstående tid

Sekvensdisplayet med gjenstående tid gjør det mulig for personalet å kontrollere fremgangen i syklusen, slik at arbeidsflyten kan planlegges mer effektivt og man bruker mindre tid på å vente på at syklusen skal bli ferdig.

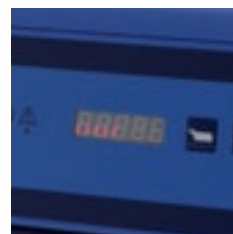

Rørsystemdesinfeksjon (PSD)

Rask desinfeksjon gjennom alle de faste og roterende dysene gir også en unik fordel, fordi hele rør- og dysesystemet desinfiseres i hver syklus, noe som eliminerer faren for kontaminasjon.

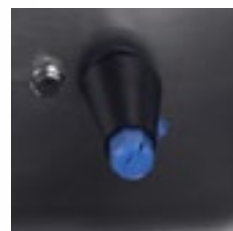

SKAPE EN KOMPLETT LØSNING

Getinge FD1600 spiller en sentral rolle i et effektivt vaskerom, men er bare ett element i effektiv infeksjonskontroll. Getinge kan hjelpe deg å bygge opp et optimalt vaskerom og opprette en total strategi for infeksjonskontroll.

Etter at spyledekontaminator er valgt, kan de følgende tre trinnene brukes som en veiledning for å skape en komplett løsning:

TRINN 1: Velge riktig holder

Universalholderen passer for de fleste vanlige beholdere. En lang rekke holdere for andre typer gods er også tilgjengelig. Disse holderne kan håndtere en rekke typer bekken, samt bøtter og urinflasker. Optimal ytelse kan bare oppnås ved å velge den ideelle holderen fra det omfattende standardutvalget som tilbys av Getinge.

TRINN 2: Velge tilbehør

Getinge tilbyr også en rekke nyttige tilbehør, for eksempel et unikt, anatomisk utformet bekken med lokk. Getinges kjemikalier, et optimalisert skylle- og avkalkingsmiddel og et svært effektivt vaskemiddel, er utviklet for å oppfylle de strengeste prosesskrav.

STEP 3: Utformet et komplett vaskerom

Getinge tar hensyn til alle aspekter ved vaskerommet, og leverer omfattende støtte fra opplæring i gode hygienerutiner til råd om romlayout og valg av utstyr. Getinge tilbyr også et komplett møbelkonsept for vaskerommet, som bidrar til å skape et hygienisk og sikkert arbeidsmiljø for kunden.



Urinflaske og bekken med lokk



Tre urinflasker



Bøtte med lokk

TEKNISKE SPESIFIKASJONER



**Getinge FD1600 i polymermateriale,
benkmontert eller frittstående**

**Getinge FD1600 rustfritt stål,
benkmontert eller frittstående**

Getinge FD1600, frittstående og benkmonterte modeller

Vekt, frittstående / benkmontert	90 kg / 70 kg
Bredde, frittstående / benkmontert	450 mm / 450 mm
Dybde, frittstående / benkmontert	580 mm / 580 mm
Høyde, frittstående / benkmontert	1320 mm / 870 mm
Avløpskopling vegg / gulv vegg / gulv	Ø110 mm Ø90 mm
Strømforbruk	0,16 kWh/syklus
Maks. utvendig temperatur	40 °C
Støynivå	53 dB (A) i henhold til EN ISO 3747:2000
Vannkoplinger – kaldt og varmt vann	
Vann	15 mm
Trykk	1-8 Bar (14-116 PSI)
Vannmengde	>0,3 l/s
Vannforbruk	Økonomiprogram 11 liter/syklus ±10 % Normalprogram 18 liter/syklus ±10 %
Godkjenninger	MDD 93/42/EEC. Tredjepartssertifikat for EN ISO 15883-1 og 15883-3.

Mål og spesifikasjoner for skap som passer til Getinge FD1600 er tilgjengelige på forespørsel.



KOMPLETTE LØSNINGER FOR INFEKSJONSKONTROLL

Getinge er verdens ledende leverandør av løsninger for effektiv rengjøring, desinfisering og sterilisering innen helsesektoren og farmasøytisk industri. Vårt mål er å hjelpe våre kunder å gi bedre pleie med lavere kostnader. Vi gjør dette ved å tilby gjennomtenkte og tilpassede løsninger. Dette betyr at vi er med kunden hele veien fra arkitektonisk planlegging og utdanning til sporbarhet og support – med komplette løsninger, langsiktig engasjement og global tilstedeværelse. Getinge – Always with you.

Getinge Norge AS

Ryenstubben 2

0679 Oslo

NORGE

Telefon: +47 23 03 52 00

Telefax: +47 23 03 52 01

GETINGE

GETINGE GROUP

www.getinge.com

GETINGE GROUP er en ledende global leverandør av utstyr og systemer som bidrar til bedre kvalitet og kostnadseffektivitet innen helse- og omsorgssektoren. Vi opererer under de tre varemerkene til ArjoHuntleigh, GETINGE og MAQUET. **ArjoHuntleigh** fokuserer på løsninger for pasientmobilitet og behandling av sår. **GETINGE** leverer løsninger for infeksjonskontroll innen helse- og omsorgssektoren. **MAQUET** spesialisere seg på løsninger, terapi og produkter for operasjonsstuer og intensivavdelinger.