

**GETINGE 600-SERIEN
SPYLEDEKONTAMINATOR MED TOPPMATING**



BRUKERVENNLIGHET? OPTIMAL TEKNOLOGI? FÅ BEGGE DELER!

Å utvikle desinfeksjonsutstyr som er både enkelt å bruke og teknisk perfekt, er ingen enkel oppgave. Det har tatt oss rundt 70 år og titusener av oppdrag i klinikker og kirurgiske avdelinger over hele verden!

I dag er Getinge ledende i verden på dette området, på grunn av nyskapninger som Getinge 600-serien – en serie ekstremt brukervennlige spyledesinfektorer med enestående teknologi for rengjøring og desinfeksjon. Les mer om de smarte detaljene på de neste sidene.

Alle spyledesinfektorer i Getinge 600-serien har toppmatting. De har to funksjoner:

- Vaskedesinfektorer for avføringsbeholdere
- Utslagsvasker med valgfri kantspyling.

Dette eliminerer behovet for en separat utslagsenhet i desinfeksjonsrommet, og sparer dermed tid, plass og penger. Utslagsvasken blir en klinisk vaskeservant når en desinfeksjonssyklus startes etter tømningen.

Hele prosessen – fra tømning til rengjøring og desinfeksjon – tar bare 4-7 minutter.

Lett å arbeide med

De toppmatede spyledesinfektorerne i Getinge 600-serien er utformet slik at fronten er lavere enn baksiden. Den lave fronten gjør enheten egnet som utslagsvask. Tømning av vaskebøtter og andre store beholdere er mer ergonomisk med den lave fronten.

Praktisk fotpedal som standard

For å gjøre håndteringen av gjenstander enda mer praktisk og for å unngå forurensning av rene hender, leveres alle modeller i Getinge 600-serien med en fotpedal for åpning og lukking av lokket. Fotpedalen kan også brukes til å starte programmet som brukes oftest på avdelingen.

Overlegen rengjøring og desinfeksjon

Med Getinge 600-serien har vi gjort rengjøring og desinfeksjon mer effektivt enn noen gang. Svært skitne gjenstander rengjøres av roterende dyser og et effektivt spylesystem. Deretter varmedesinfiseres de av damp fra alle dysene. Innvendig desinfeksjon av flasker og lignende


beholdere sikres også. Men det er ikke bare gjenstandene som skal vaskes, som har nytte av den enestående desinfeksjonen i maskinene i Getinge 600-serien. Maskinens vaskekammer, rør, dyser osv. blir også desinfisert etter hver prosess – takket være rørdesinfeksjonssystemet PSD (Pipe System Disinfection).

Dette betyr at det ikke blir liggende igjen noen mikroberester mellom prosessene, slik at hygienen blir enestående.

Automatisk konveksjonstørking

Når prosessen er ferdig, indikerer en grønn lampe at rengjøring og termisk desinfeksjon er utført. Når lokket åpnes ved at fotpedalen trykkes, indikeres desinfeksjonstemperaturen og det grønne signalet slukkes. Denne funksjonen eliminerer faren for å blande urent og rent gods.

Hvis desinfeksjonstemperaturen ikke er nådd, tennes en rød lampe og lokket forblir lukket.

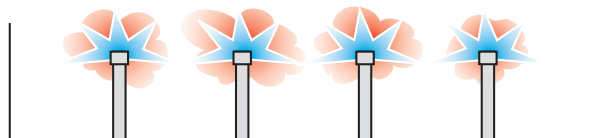

I Getinge 600-serien forsynes damp via hver enkelt spyledyse direkte til hver enkel gjenstand som skal desinfiseres.





Fotpedalen er standardutstyr.



Automatisk tørkemodus.



Lokket åpnes helt når pedalen trykkes.



Skråstilt spylekammer

– gjør det enkelt å laste, tømme og overvåke gjenstandene.

Praktisk utslagsvask

– med manuell kantspyling.

Overlegen desinfeksjon

– selv på innsiden av gjenstandene, fordi dampen sprøytes inn gjennom alle dysene.

Grundig rengjøring

Perfekt resultat sikres ved å kombinere en universalholder og rengjøringsdysene – én roterende innsprøytingsdyse, 6 faste dyser og 3 valgfrie kantspyledysere.

Dypt spylekammer

– minimerer faren for smussrester i skjøter og lommer.

SPYLEDEKONTAMINATOR 600-SERIEN

Kammerets volum	70 l
Kammerets høyde	400 mm
Kammerets bredde	400 mm
Kammerets dybde	465 mm

Veggmontert eller frittstående

– det er lett å komme til under maskinen ved gulvask.

Fotpedal (standard)

– betjener lokket og hindrer kontaminering av rene hender.




Getinges utvalg av vaskemidler er utviklet, testet og kontrollert på Getinges spyledesinfektorer for beholdere til biologisk avfall, for å oppfylle EN ISO 15883-standarden for vaskeeffektivitet når det gjelder gods som brukes i vaskerom og til å beskytte brukere og pasienter.





DREIEFUNKSJON FOR AUTOMATISK TØMMING

Tømmer automatisk sugeflasker, bekken osv. For å hindre ubehagelig lukt og gasser, tømmes ikke gjenstandene før lokket er lukket (dette skjer automatisk).

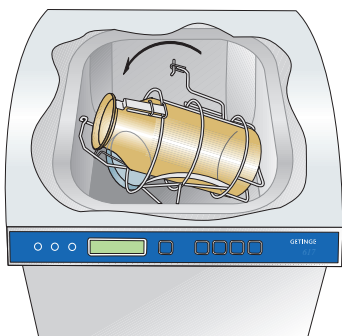

Prinsippskisse for den automatiske dreieenheten.



Holder til sugeflaske
2-5 liter.
Delennr. 500 44 00-00.



Holder til bekken og håndtak.
Delennr. 499 95 72-00.



Ekstra holder til sugeflaske
0,7 liter.
Delennr. 500 07 72-00.
Passer holder
Delennr. 500 44 00-00.

VALGFRITT TILBEHØR Automatisk tømning

	DELENR.
Bunn-innsats	500 11 39-00
Stativ til redskaper	499 96 10-00
Instrumentfjær	499 11 16-00
Ekstra innsprøytingsrør	503 31 88-00
Holder til sugeflaske 2-5 liter	500 44 00-00
Adapter til små sugeflasker 0,7/1,2/2,0 liter, Egnel, Mediada og Meddela	500 07 72-00
Passer holder	500 44 00-00
Adapter til små sugeflasker 0,25-0,5 liter, Meddela, FMS	500 05 16-00
Passer holder	500 44 00-00
Holder til ett rundt bekken	499 95 72-00
Holder til ett rundt bekken og én urinflaske	501 14 05-00
Adapter for små urinflasker	500 26 57-00
Passer holder	501 14 05-00

VALGFRITT TILBEHØR Manuell tømning

	DELENR.
Adapter for tre urinflasker	499 95 71-00
Stativ til redskaper	499 96 10-00
Instrumentfjær	499 11 16-00
Ekstra innsprøytingsrør	503 31 88-00
Adapter for sugeflaske	499 99 99-00

GETINGE 600-SERIEN I KLINIKKER OG KIRURGISKE AVDELINGER



Noen lastealternativer



TEKNISKE DATA

Getinge 600-serien

Vekt	85 kg
Bredde	590 mm
Dybde	660 mm
Høyde	1000-1060 mm
Avløpskopling vegg / gulv	Ø 110 mm
vegg / gulv	Ø 90 mm
Strømforbruk	0,16 kWh/syklus
Maks. utvendig temperatur	40 °C
Støynivå	53 dB (A) i henhold til EN ISO 3747:2000
Vannkoplinger – kaldt og varmt vann	
Vann	15 mm
Trykk	1-8 Bar (14-116 PSI)
Vannmengde	>0,3 l/s
Vannforbruk	Økonomiprogram 18 liter/syklus ±10 % Normalprogram 25 liter/syklus ±10 % Intensivprogram 35 liter/syklus ±10 %
Godkjenninger	MDD 93/42/EEC. Tredjepartssertifikat for EN ISO 15883-1 og 15883-3



Getinge Infection Control er verdens største leverandør av løsninger for steril prosessering i helsesektoren. Vårt mål er å sikre høyeste kvalitet og den best sikkerhet til lavest total kostnad. Vi tilbyr komplette løsninger for en sømløs arbeidsflyt for å redusere faren for kontaminasjon, samtidig som vi hjelper helsepersonell med å øke effektiviteten.

Getinge Norge AS

Strandveien 13

1366 LYSAKER

NORGE

Telefon: +47 23 03 52 00

Telefax: +47 23 03 52 02

GETINGE

GETINGE GROUP

getinge.com

GETINGE GROUP er en ledende global leverandør av utstyr og systemer som bidrar til bedre kvalitet og kostnadseffektivitet innen helse- og omsorgssektoren. Vi opererer under de tre varemerkene til ArjoHuntleigh, GETINGE og MAQUET. **ArjoHuntleigh** fokuserer på løsninger for pasientmobilitet og behandling av sår. **GETINGE** leverer løsninger for infeksjonskontroll innen helse- og omsorgssektoren. **MAQUET** spesialiserer seg på løsninger, terapi og produkter for operasjonssstuer, intervensjonell kardiologi og intensivavdelinger.